

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/krzeselko-ewakuacyjne-elektryczne-titan-person-169kg-udzwigu-p-185.html>



Krzeselko ewakuacyjne elektryczne TITAN Person Mini (ST003C), (169kg udźwigu)

Cena brutto	9 990,00 zł
Cena netto	9 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	KRZETITPERSM
Kod producenta	ST003C
Producent	TITAN
Zastosowanie schody	proste
Rama	stop aluminium
Prędkość	1,7 sekundy na stopień
Zasięg	2500 stopni
Udźwig	169kg
Waga urządzenia	35kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Wymiary rozłożony	146cm wys. x 57cm szer. x 71cm gł.
Wymiary złożony	100cm wys. x 57cm szer. x 32cm gł.
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Krzesło do ewakuacji TITAN Person Mini

Zastosowanie:
- dla szpitali,
- pogotowia ratunkowego,


- transportu medycznego,
- straży pożarnej,
- rodzin transportujących chorego po schodach.

Krzesiwo ewakuacyjne Titan Person Mini to zmotoryzowane krzesiwo zaprojektowane w celu uwiatwienia przenoszenia pacjentów na schodach. Pozwala na obsiugę bez wysiiku dla operatora oraz przy maksymalnym komforcie i bezpieczeŃstwie dla chorego.

Krzesiwo Titan Person Mini jest wyposaŹony w dwie pary uchwytów, aby zapewnió najlepszà obsiugę zgodnie z przepisami bezpieczeŃstwa.

Silnik uwiatwia poruszanie się po schodach w góre i w dół.

Konstrukcja ze stopu aluminium jest skiadana, iatwa w obsiudze i dlatego moŹna jà iatwo umieścić w pojazdach transportowych.

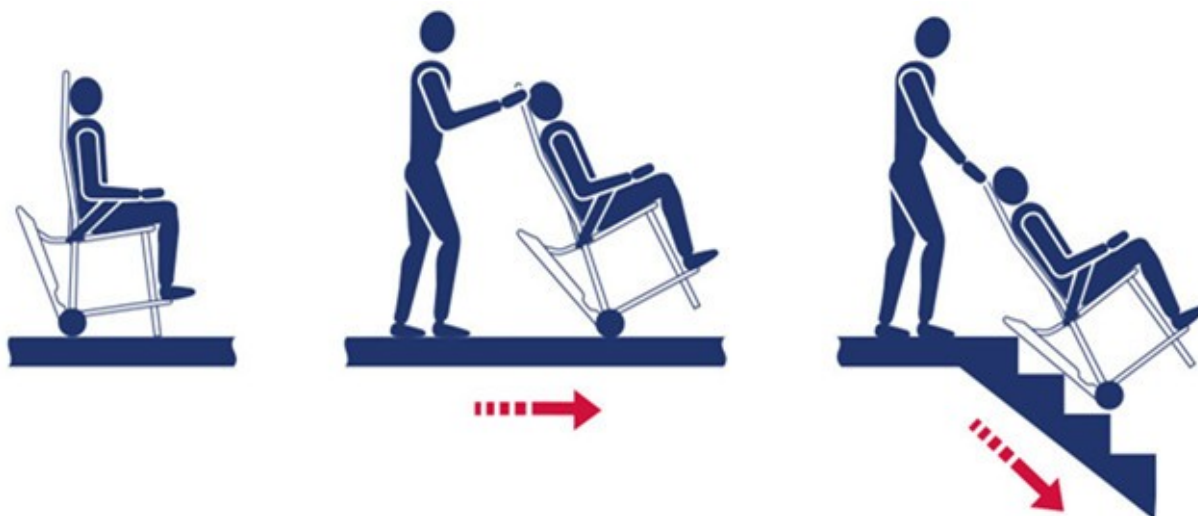

Krzesiwo ratunkowe elektryczne Titan Person Mini

Elektryczne krzesiwa ewakuacyjne to duŹa pomoc dla słuŹb medycznych czy ratunkowych. Ze wzgledu na swe praktyczne funkcje i bardzo nowatorskie rozwiàzania, znajduj à zastosowanie gównie w usiugach medycznych. Charakteryzuj à się szeregiem zalet, ale teŹ wytrzymałym i bardzo estetycznym wykonaniem.

Elektryczne krzesiwa do ewakuacji - obsiuga

Elektryczne krzesiwo ratunkowe, jak sama nazwa wskazuje, posiada napęd elektryczny. To jego wielka zaleta, poniewaŹ operator moŹe samodzielnie przetransportowaó osobę majàcà trudnośc i w poruszaniu się, bez pomocy dodatkowego personelu. Przeniesienie chorego po schodach odbywa się więc, dzieki napędowi elektrycznemu. Urzàdzenia te majà wydajnà i pojemnà baterià, stàd mogà się pochwalió dlugotrwałym działaniem. Potrafià pokonaó nawet 2500 stopni na jednym naładowaniu. Transport po schodach odbywa się z prędkośc ià 1,7 sekundy na stopieŃ. NajwaŹniejsze jest tu jednak bezpieczeŃstwo chorego. Elektryczne krzesiwa ratunkowe wyposaŹone sà więc w pasy, które stabilizuj à sylwetkê i gwarantuj à pełen komfort podczas transportu przez słuŹby medyczne. Ze wzgledu na przepisy bezpieczeŃstwa, krzesiwo posiada takŹe dwie pary uchwytów.

Elektryczne krzesiwa do ewakuacji - funkcjonalnośc

Operatorzy tego rodzaju sprzētu cen ià sobie gównie iatwośc obsiugi. Wszystko odbywa się za poórednictwem intuicyjnych przycisków. Elektryczne krzesiwa transportowe sà bardzo lekkie. Jest tak ze wzgledu na ich konstrukcjê oraz materiai

wykonania, jakim jest wytrzymałe aluminium. Przy wadze własnej 35 kg, posiadają one udźwig do 169 kg. Warta uwagi jest także łatwość składania i rozkładania krzeselka. To bardzo ważne, aby odbywało się to szybko i sprawnie, ponieważ zadaniem urządzenia jest nierzadko ratowanie życia i zdrowia pacjenta. Titan Person Mini z pewnością powinien się więc znaleźć na wyposażeniu szpitali, klinik, transportu medycznego. Sprawdza się również do użytku w prywatnych domach, w celu wspomagania osób niepełnosprawnych czy seniorów w codziennym pokonywaniu schodów.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł)

Szafka do przechowywania:: brak , jest (+ 1 990,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Krzesła ewakuacyjne są przeznaczone do użycia tam, gdzie zachodzi potrzeba transportu osób chorych lub rannych, zwłaszcza na wąskich przestrzeniach.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku ze schodów, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji np. ze ścianą, związanej z przemieszczaniem krzesła. Rodzaje ryzyka są takie same dla pacjenta i osoby asystującej w transportowaniu.

POMOC

- [KRZESŁO KARDIOLOGICZNE](#)
- [KRZESŁA EWAKUACYJNE TRANSPORTOWE](#)
- [RODZAJE KRZESEŁ DO EWAKUACJI](#)
- [ELEKTRYCZNE KRZESŁA TRANSPORTOWE](#)